




Quand prélever :

- En dehors de tout traitement antibiotique, sauf avis médical. Prélever la première miction du matin de préférence ou, si possible, attendre **au moins 2 heures** après une miction pour permettre un temps de stase suffisant dans la vessie.
- Avant la mise en place d'une antibiothérapie
- Au minimum 7 jours après l'arrêt des antibiotiques s'il s'agit d'un contrôle après traitement (en cas de cystite)

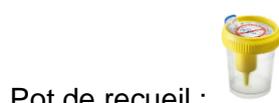

Comment prélever :

1. Se laver les mains avec soin et effectuer une toilette intime	
2. Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle avec la canule dirigée vers le haut (couvercle retourné). Ne pas toucher la canule avec les doigts	
3. Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes, puis le reste des urines dans le pot	
4. Refermer le pot avec le couvercle	
5. Soulever l'étiquette de la protection située sur le couvercle (attention, cette étiquette protège une aiguille)	
6. Vérifier que la canule plonge bien dans l'urine (au besoin, incliner légèrement le pot).	
7. Dans l'orifice contenant l'aiguille : enfoncer à fond les tubes jusqu'à ce que le bouchon en caoutchouc du tube soit perforé par l'aiguille. En 1^{er} les 2 petits tubes BLANC (Cytologie, Hématurie, Albuminurie, glycosurie, nitrite...) En 2^{ème} le grand tube JAUNE ou KAKI (bactériologie) Le remplissage est automatique jusqu'au volume prédéfini. Si très peu de volume, transmettre au laboratoire dans les 2 heures suivant le recueil (sans remplir les tubes).	

8. Retirer les tubes et homogénéiser par 8 à 10 retournements lents.	
9. Recoller l'étiquette papier sur l'orifice du couvercle (pour protéger l'aiguille)	
10. Identifier le (ou les) tube(s) (nom, prénom, date de naissance)	
11. Transmettre au laboratoire : - Les tubes remplis - Le pot (même si celui-ci est vide). - Ne pas jeter le pot à la poubelle	

Conservation : Le prélèvement percuté (=dans le grand tube jaune) est conservé à température ambiante (ne pas mettre au frais) 24 heures maximum (**garantit la fiabilité du résultat**).

Si le prélèvement est effectué sur tout autre flacon stérile sans conservateur : conservation possible au maximum 2 h à température ambiante, au-delà mettre le flacon à +4°C pendant 12 h maximum.

Apporter le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire et joindre le questionnaire renseigné.

Nom : Prénom :

Nom de naissance : Date de naissance :

Date et heure de recueil :

Mode de recueil : Miction Sondage Sonde à demeure Urinocol

Renseignements cliniques : (cocher les cases correspondantes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Brulures en urinant | <input type="checkbox"/> Grossesse |
| <input type="checkbox"/> Envie fréquente d'uriner | <input type="checkbox"/> Traitement antibiotique en cours |
| <input type="checkbox"/> Fièvre | lequel ?..... |
| <input type="checkbox"/> Douleurs abdominales | <input type="checkbox"/> Traitement antibiotique arrêté |
| <input type="checkbox"/> Opération prévue le | depuis le |
| <input type="checkbox"/> Suspicion de prostatite | <input type="checkbox"/> Absence de symptômes |

Commentaires :